



Кафедра детской, профилактической
стоматологии и ортодонтии

Институт стоматологии
им. Е.В. Боровского

Москва
2023

Инфильтрационная технология ICON для лечения кариеса у детей

ДВ Инновационные технологии в детской стоматологии



Prevention

Icon




Показания:

- кариес до начальных слоев дентина, без образования полости

Противопоказания:

- кариес с образованием полости
- фиссурный кариес
- кариес в пределах средних слоев дентина

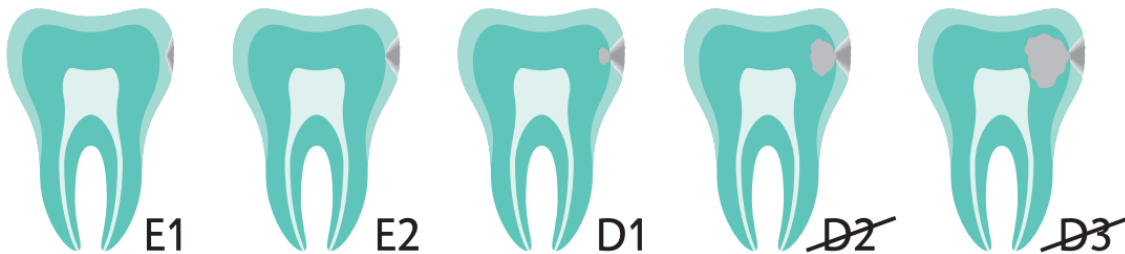

Состав:


- Icon-Etch: соляная кислота, пирогенная кремниевая кислота, поверхностно-активные субстанции
- Icon-Dry: 99% этанола
- Icon-Infiltrant: смоляная матрица на основе метакрилата, иницирующие вещества, добавки





Алгоритм применения Icon:


- Снятие зубного налета
- Изоляция рабочего поля
- Нанесение Icon-Etch на 2 мин
- Промывание водой 30 сек

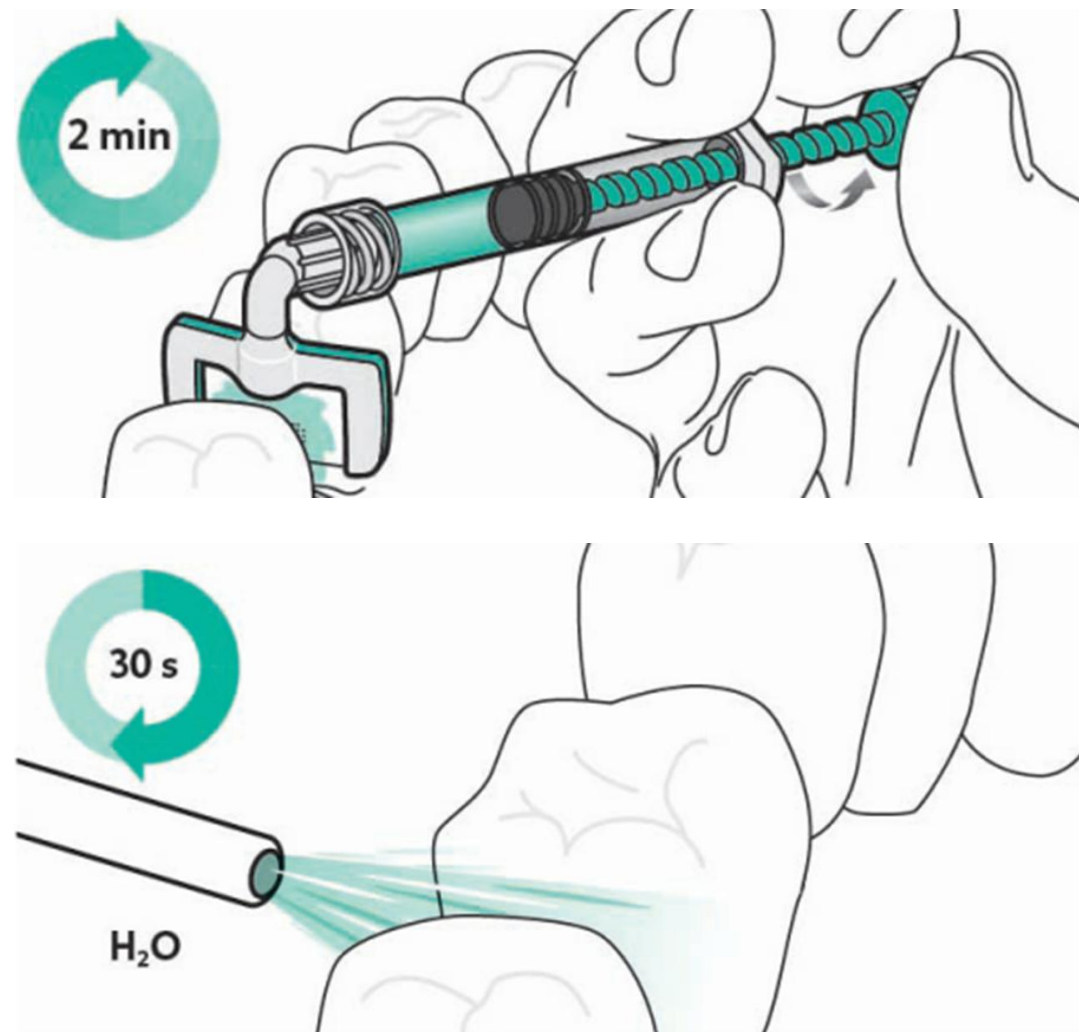

Алгоритм применения Icon:

- Нанесение Icon-Dry 30 сек
- Нанесение Icon-Infiltrant на 3 мин
- Обработка воздушной струей 30 сек
- Полимеризация 40 сек
- Полирование

40 сек

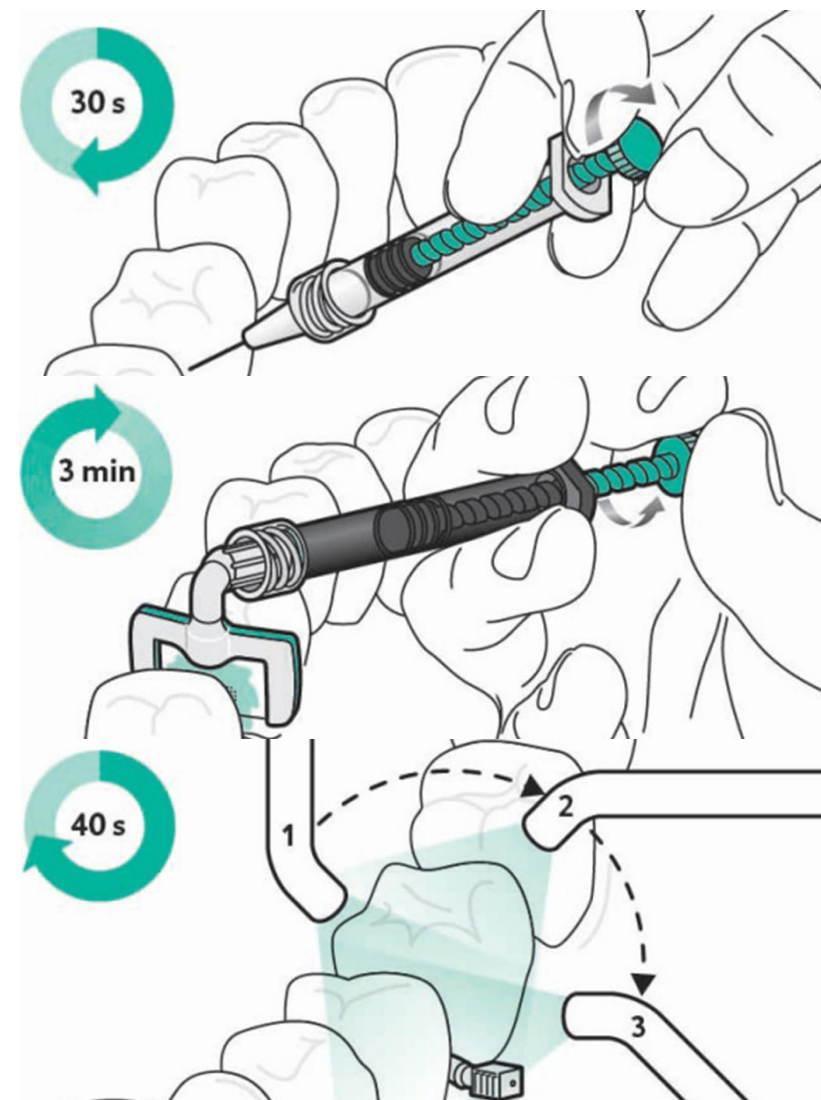

! После проведения методики инфильтрации обязательно необходимо назначить реминерализирующую терапию в домашних условиях в течение месяца

Клинический случай













